

Sello del especialista

Número de serie.



RehaGirona, sl  
Trens Petits 1  
Pol. Ind. Mas Xirgu  
17005 Girona

T +34 902 48 72 72  
F +34 972 40 50 54  
[www.rehagirona.com](http://www.rehagirona.com)  
[rehagirona@rehagirona.com](mailto:rehagirona@rehagirona.com)

**Schuchmann GmbH & Co. KG**

Dütestr. 3

49205 Hasbergen

Teléfono: 05405 - 90 90

Fax: 05405 - 90 91 09



## Manual de instrucciones



***Sofie***

**Asiento terapéutico**

**Queridos clientes,**

Ante todo le queremos dar las gracias por la confianza que nos ha mostrado y agradecerle la compra de nuestro producto.

Le rogamos lea atentamente las advertencias contenidas en este manual, ya que le proporcionará importantes indicaciones sobre la seguridad de uso y modo de empleo.

El fabricante se reserva el derecho de alterar las características del modelo.

**¡ATENCIÓN!**

Rogamos conserve las instrucciones. Para una mayor seguridad, guarde una fotocopia de dicho manual.

**Su equipo Schuchmann**

**6. Eliminación de desechos**

En caso de que Madita deba ser retirada, rogamos diríjase al centro de reciclaje más cercano, donde separan los distintos materiales para su posterior reciclaje.

**7. Garantía**

En caso de daños provocados durante el transporte, será necesario informar inmediatamente a la empresa distribuidora en un plazo de 24 horas a partir de la recepción de la mercancía. Otras deficiencias que pudieran detectarse deben ser notificadas en el plazo de una semana y por escrito, en caso contrario se considerará que la mercancía ha sido aceptada. Este plazo de una semana empieza en el momento que se reciba la mercancía por parte de la empresa distribuidora.

Rehagirona garantiza este producto por un periodo de dos años, a partir de la fecha de la factura. Los productos que incorporen algún tipo de baterías, la garantía de estas será de 6 meses.

Para la ejecución de la garantía, el usuario debe presentar el producto adjuntando el comprobante de compra.

La garantía cubre:

- Todas las piezas dañadas o inutilizables por fallos en el material o en la fabricación demostrables, piezas que según nuestra valoración podrán ser reparadas o cambiadas de forma gratuita.

La garantía no cubre

- Desgaste normal por el uso del producto como: cubiertas, cámaras, aros, ruedas, tejidos, baterías, etc.
- Accidentes, como estructuras dobladas, rayones, pinchazos, etc.
- Uso inapropiado, de cualquier de las indicaciones o limitaciones del producto.
- Falta del mantenimiento indicado en el manual de instrucciones.
- Modificaciones o reparaciones hechas por personas no autorizadas para dicha función.
- Gastos o responsabilidades en el caso de daños producidos en terceras personas que hayan usado el producto.
- Falta de comprobante de compra o de número de serie del producto. (en los productos seriados.)

#### 4. Mantenimiento e inspección

La silla terapéutica no necesita mantenimiento.

Todos sus componentes están totalmente protegidos contra la corrosión. Sin embargo, bajo condiciones desfavorables se puede producir cierta herrumbre en sus componentes cromados. Se puede eliminar con unas simples medidas de mantenimiento (cuidado del aceite, abrillantador, etc.)

Es recomendable verificar todos los tornillos de la silla después de un largo período de uso.

El tapizado puede lavarse en la lavadora gracias al colchón desmontable con cremallera.

Indicaciones de lavado del tapizado en la lavadora:

- Lavar a 30° máximo
- Para el secado centrifugue la funda y estírela hasta que adquiera la forma deseada

#### 5. Datos técnicos

| Cuadro de medidas,<br>cm.               | T. 0         | T. 1         | T. 2         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Profundidad de asiento                  | 15 - 24      | 21 - 30      | 30 - 42      |
| Ancho de asiento                        | 16 - 30      | 16 - 30      | 26 - 38      |
| Altura respaldo corto                   | 30           | 30           | 40           |
| Altura respaldo largo                   | 38           | 38           | 48           |
| Altura máxima<br>ajustable del respaldo | 45           | 45           | 55           |
| Regulación ángulo<br>respaldo           | (-) 5° - 25° | (-) 5° - 25° | (-) 5° - 25° |
| Carga máxima (kg)                       | 30           | 30           | 60           |
| Peso (kg)                               | 9            | 9            | 11           |

Ruedas: 2 x ruedas dobles, 2 x ruedas dobles con bloqueo

Material: Tubo de acero (pintado/cromado)

 Este producto esta conforme con la directiva comunitaria 93/42/EWG para productos sanitarios.

| Indice                           | Página |
|----------------------------------|--------|
| 1. Características generales     | 4      |
| 2. Componentes                   | 4      |
| 3. Ajustes                       |        |
| 3.1 Profundidad de asiento       | 5      |
| 3.2 Ancho de asiento             | 5      |
| 3.3 Altura respaldo              | 6      |
| 3.4 Inclinação respaldo          | 6      |
| 3.5 Reposabrazos                 | 7      |
| 3.6 Reposacabezas                | 7      |
| 3.7 Soportes Laterales           | 8      |
| 3.8 Soportes laterales abatibles | 8      |
| 3.9 Mesita terapéutica           | 9      |
| 4. Mantenimiento e inspección    | 10     |
| 5. Datos técnicos                | 10     |
| 6. Eliminación de desechos       | 11     |
| 7. Garantía                      | 11     |

## 1. Características generales


Sofie está pensada para niños y jóvenes con el fin de compensar una reducida capacidad de movimiento al sentarse, sostenerse y de sujeción del tronco.

El asiento permite el ajuste del ángulo, la profundidad, el ancho del asiento y la altura del respaldo. Los demás accesorios (reposacabezas, soportes, hebillas, etc.) ofrecen un ajuste exacto y un apoyo óptimo.

### ⚠ ATENCIÓN

- ⚠ El producto no se debe usar sin asistencia.
- ⚠ El producto sólo puede transportarse bajo condiciones favorables.
- ⚠ El producto no está pensado para su uso en el coche.
- ⚠ ¡Tras los trabajos de ajuste asegúrese de que los tornillos estén bien fijados!

## 2. Componentes

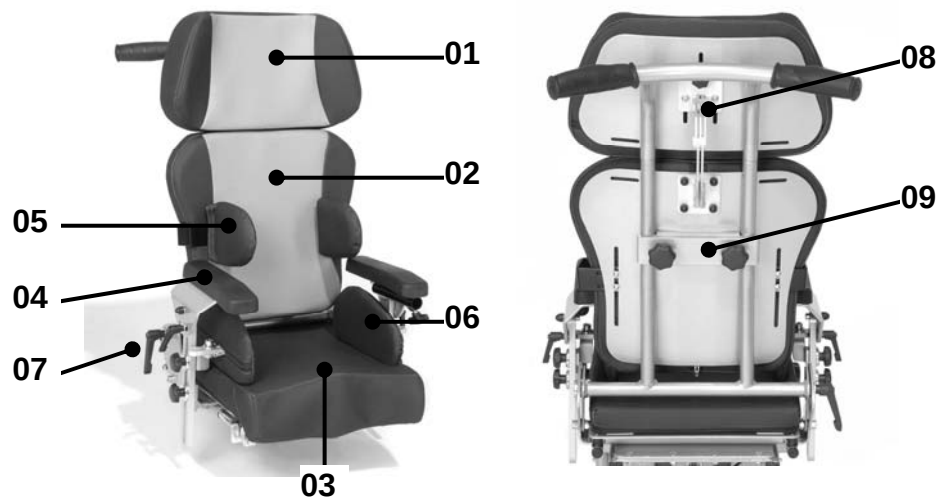

| Pos. | Denominación       | Pos. | Denominación               |
|------|--------------------|------|----------------------------|
| 01   | Reposacabezas      | 06   | Soportes laterales cadera  |
| 02   | Respaldo           | 07   | Ajuste ángulo respaldo     |
| 03   | Asiento            | 08   | Reposacabezas regulable    |
| 04   | Reposabrazos       | 09   | Ajuste altura del respaldo |
| 05   | Soportes laterales |      |                            |

## 3.9 Modo de empleo mesita terapéutica

Para ajustar la altura de la mesita, debe ajustar la altura del reposabrazos. (ver 3.9)



Para cambiar la distancia entre la mesita y el niño y regular su profundidad, afloje el pomo.




Para abrir la mesita, para colocar al niño, simplemente mueva la mesita hacia arriba.

### ⚠ ATENCIÓN

¡Tras los trabajos de ajuste asegúrese de que los tornillos estén bien fijados!

**3.7 Soportes laterales**


Ajuste los soportes laterales aflojando los tornillos del respaldo para fijar su anchura, altura y ángulo.

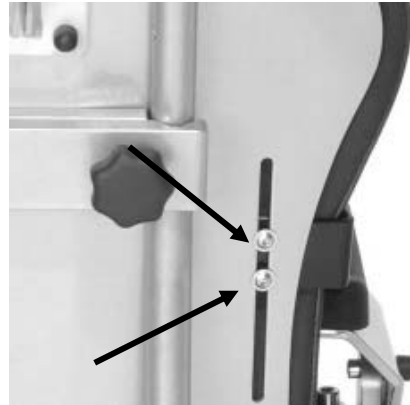**ATENCIÓN**

¡Tras los trabajos de ajuste asegúrese de que los tornillos estén bien fijados!

**3.8 Soportes laterales abatibles**


Presione el botón rojo situado en la parte superior y saque los soportes hacia un lado. Para volverlos a poner tenga cuidado con que los soportes encajen de forma audible.

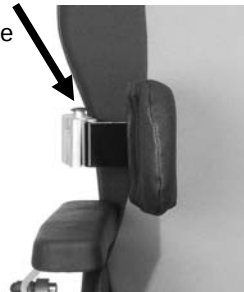**3. Ajustes****3.1 Profundidad de asiento**

Aflojando los tornillos allen ubicados en los laterales, se desplaza la base del asiento hacia delante o hacia atrás.

**3.2 Ancho de asiento**

Para el ajuste del ancho del asiento fíjese en los soportes laterales de cadera. Para ello, suelte el tornillo de (A) y los soportes se ajustarán en anchura y ángulo. El ajuste de altura se consigue soltando el pomo graduable (B).

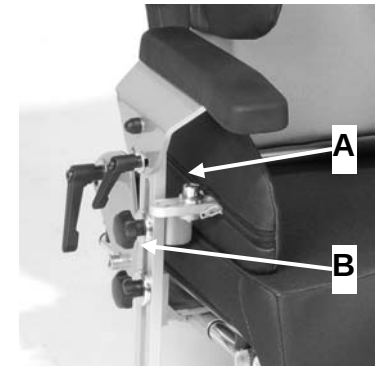**ATENCIÓN**

¡Tras los trabajos de ajuste asegúrese de que los tornillos estén bien fijados!

### 3.3 Altura respaldo

Para ajustar la altura del respaldo afloje los pomos graduables situados en la parte posterior del mismo.



### 3.4 Inclínación del respaldo

Ajuste el ángulo del respaldo aflojando la palanca de fijación.




#### ATENCIÓN

¡Tras los trabajos de ajuste asegúrese de que los tornillos estén bien fijados!

### 3.5 Reposabrazos

Los reposabrazos se pueden ajustar en ángulo, altura y ancho. Ajuste el ángulo aflojando la palanca de fijación (A). La altura se ajusta aflojando los pomos graduables (B).

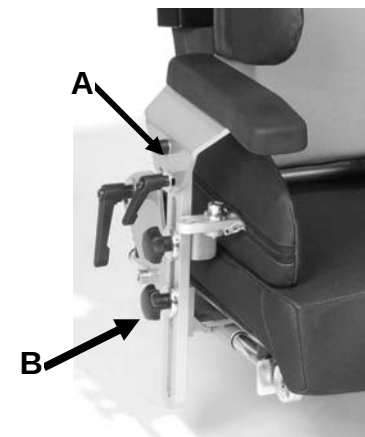


El ajuste de la anchura debe ajustarse mediante el tornillo (C) situado debajo del asiento.



### 3.6 Reposacabezas

Para ajustar su altura afloje los pomos graduables (A) del respaldo. Para ajustar el ángulo suelte los tornillos (B) de la base del reposacabezas.

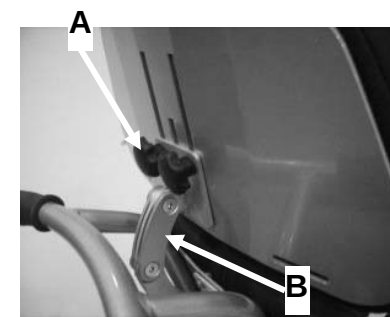

#### ATENCIÓN

¡Tras los trabajos de ajuste asegúrese de que los tornillos estén bien fijados!